



ДОГЛЯД ЗА СТОМОЮ CASEX



CASEX


ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Місія бразильської компанії Casex - виробляти продукцію з любов'ю, відповідальністю, досконалістю та інноваціями, даючи всю необхідну підтримку, щоб забезпечити кращу якість життя пацієнтам.

Casex представляє інноваційне рішення для делікатної проблеми - калоприймач Casex з Алое Вера. Калоприймач має унікальну гідроколоїдну пластину з Алое Вера, яка допомагає захистити та відновити шкіру навколо стоми. Гідроколоїдна пластина має відмінні властивості, які обумовлені її складом.

Гідроколоїдна пластина складається з:



- натрію карбоксиметилцелюлози;
- желатину;
- пектину;
- поліізобутилену;
- екстракту алое вера.

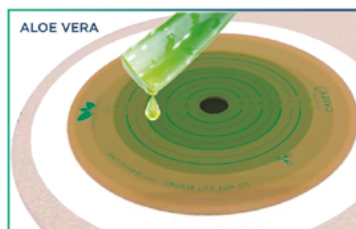

Пластина забезпечує надійну фіксацію, дозволяє зменшити кількість та ступінь ускладнень, абсорбує вологу, захищає не тільки стому, а й шкіру навколо неї. Калоприймач має отвір 13мм, який може бути збільшеним під розмір та форму будь-якої стоми до 100мм. Направляючі кільця та цифрові позначки полегшують процес вирівнювання.

Не містить латексу.

*Компанія Casex пропонує широкий асортимент товарів для догляду за стомою: двокомпонентні калоприймачі, закриті калоприймачі, дитячі калоприймачі, пластини, абсорбуючі порошки, рідина для дезінфекції та очистки калоприймача.

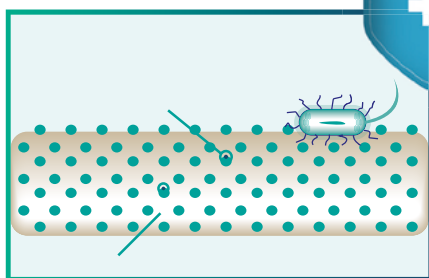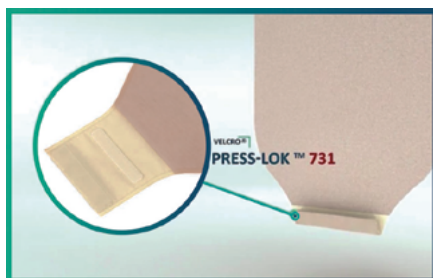

Однокомпонентний відкритий калоприймач Casex



гідроколоїдна адгезивна пластина забезпечує герметичність приклеювання калоприймача до тіла;

додатковий гідроколоїдний пластр, який забезпечує додаткову фіксацію калоприймача;

мікроперфорований м'який шар, який прилягає до шкіри та захищає її від подразнення;

двошаровий мішок з бар'єром, який перешкоджає розповсюдженню запаху з калоприймача;



багаторазовий затискач.

CASEX ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 13 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •10 - 80мм
•13 - 80мм

REF 3445-00W (тілесний)
REF 3445-00C (прозорий)



CASEX ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 13 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •10 - 60мм
•13 - 64мм
•13 - 70мм
•19 - 64мм

REF 3445-00C (прозорий)



CASEX ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 13 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •10 - 60мм
•13 - 64мм
•13 - 70мм

REF 3245-00W (тілесний)



*Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

CASEX

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КОНВЕКСНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF DCH-W (тілесний)
REF DCH-C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 5 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 3 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •13 - 25мм
•13 - 38мм
•13 - 51мм



CASEX

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF 3250W (тілесний)
REF 3250C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 13 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •13 - 64мм
•13 - 80мм
•13 - 100мм



CASEX

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF 2245-00W (тілесний)
REF 2245-00C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 20 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •10 - 60мм
•13 - 64мм
•13 - 70мм
•13 - 80мм



*Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

CASEX ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF 3250-00W (тілесний)
REF 3250-00C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •13 - 100мм

Калоприймач має отвір 13 мм, який може бути збільшений під розмір і форму будь-якої стоми до 100 мм.



CASEX ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF 4102-00W (тілесний)
REF 4102-00C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 3 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •10 - 60мм

•13 - 64мм
•13 - 70мм
•13 - 80мм



CASEX ПЕДІАТРИЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF 3550-00C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 15 шт.;
Багаторазовий затиск - 2 шт.;
Одноразовий затиск - 13 шт.;
Інструкція по використанню

Калоприймач має отвір 8 мм, який може бути збільшений під розмір і форму будь-якої стоми до 25 мм*.



1. Відрізати нижню частину для зливу та очистки
2. Використати за щоб закрити отвір.
3. Відрізати верхню частину.
4. Вставити дренажну трубку

*Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

CASEX ПЕДІАТРИЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:

Калопріймачі - 15 шт.;

Одноразовий затиск - 15 шт.;

Інструкція по використанню

Калопріймач має отвір 8 мм, який може бути збільшений під розмір і форму будь-стоми до 51 мм*.

REF 3350-00W (тілесний)
REF 3350-00C (прозорий)



CASEX УРОСТОМІЧНИЙ МІШОК

Упаковка:

Уростомічних мішків - 10 шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •13 - 45мм
•13 - 64мм

REF 5145-00C (прозорий)



CASEX УРОСТОМІЧНИЙ ПЕДІАТРИЧНИЙ МІШОК

Упаковка:

Уростомічних мішків - 10 шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*: •13 - 45мм
•13 - 64мм

REF 5045-00C (прозорий)



*Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

CASEX

REF 745

ГІДРОКОЛОЇДНА ПЛАСТИНА

Упаковка:

Пластин - 5 шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*:

- Ø 45 Виріз: 13 - 32мм
- Ø 57 Виріз: 13 - 44мм
- Ø 70 Виріз: 13 - 64мм



CASEX

REF 750

ГІДРОКОЛОЇДНА ПЛАСТИНА

Упаковка:

Пластин - 5 шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри пластин*:

- Ø 45 Виріз: 13 - 32мм
- Ø 57 Виріз: 13 - 44мм
- Ø 70 Виріз: 13 - 64мм



CASEX

ДВОХКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

REF 3700-00W (тілесний)

REF 3700-00C (прозорий)

Упаковка:

Калоприймачі - 10 шт.;

Багаторазовий затиск 2шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри фланця*:

- Ø 45
- Ø 57
- Ø 70



*Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

CASEX ДВОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:
Калоприймачі - 10 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри фланця*: •Ø 45
•Ø 57
•Ø 70

REF 2700-00W (тілесний)
REF 2700-00C (прозорий)



CASEX ДВОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:
Калоприймачі - 10 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри фланця*: •Ø 45
•Ø 57
•Ø 70

REF 1700-00W (тілесний)



CASEX ПЕДІАТРИЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ

Упаковка:
Калоприймачі - 10 шт.;
Одноразовий затиск - 10 шт.;
Інструкція по використанню

Доступні розміри фланця*: •Ø 45
•Ø 57

REF 4700-00W (тілесний)
REF 4700-00C (прозорий)



*Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

CASEX ДВОКОМПОНЕНТНИЙ УРОСТОМІЧНИЙ МІШОК

REF 5700-00C (прозорий)

Упаковка:

Уростомічних мішків - 5 шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри фланця*: •Ø 45

•Ø 57

•Ø 70



Направляючі кільця і цифрові позначення полегшують процес вирізання.

Акcesуари

ЕЛАСТИЧНИЙ РЕМІНЬ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Упаковка:

Ремінь - 4 шт.;

Інструкція по використанню

Доступні розміри: S, M, L



REF 330

БАГАНТОРАЗОВИЙ ЗАТИСК ДЛЯ КАЛОПРИЙМАЧА

Упаковка:

Багаторазовий затиск - 40 шт.;

Інструкція по використанню



REF 400

ПЛАСТИР 3M Micropore™

Рекомендується використовувати для додаткової фіксації калоприймача.

Основа: паперова

Колір: білий, тілесний

Розмір: 2,5см x 9,1м

На диспенсері: 2,5 см x 5м



НЕВИДИМИЙ ЗАХИСТ ВАШИХ ПАЦІЄНТІВ

ЗАХИСНА ПЛІВКА 3M™ Cavilon™

Оригінальний безспиртовий засіб на основі термополімерів, який допоможе запобігти пошкодженням шкіри і захистить вже травмовану шкіру від подальших ускладнень. Захисний бар'єр являє собою тонку плівку, що дозволяє шкірі дихати, та є повністю прозорою, що дає можливість постійно контролювати стан шкіри.



1 Очистіть та висушіть ділянку обробки перед застосуванням.

2 Нанесіть захисну плівку за допомогою спрею (на відстані 10-15см), серветки або аплікатора.

3 Висушіть протягом 30 секунд.

77%

пацієнтів зі стомами мають проблеми зі шкірою. Найпоширеніші проблеми серед них - подразнення та дерматити

- Допомагає захистити шкіру від натирань та саден, має переваги над іншими кремами, мазями та пастами, які можуть підвищити тертя поверхні шкіри.

- Швидко висихає, довго діє, не липне, водонепроникний і не змивається водою, що робить його легким для використання.

- Дозволяє виводити пари вологи зі шкіри.

- Допомагає підтримувати тривалий захист. Чудово поєднується з хлоргексидином та повідон-йодом.

- Не містить спирту, не пече, безболісно наноситься, не має запаху, не містить консервантів, гіпоалергенний, допомагає знизити ризик дерматитів, може використовуватись як на здоровій шкірі, так і на вже травмованій.

- Повторює форму шкіри, тим самим не обмежує рухи.

- Дозволяє накладати поверх пластрів, пов'язку або інші медичні засоби.

- Не потрібно видаляти.

Рекомендації по застосуванню

- В межах норми, повторне нанесення слід здійснювати через 48-72 години.

- В разі використання для зниження ураження від здегизивних матеріалів, необхідно повторно використовувати плівку при кожній заміні пов'язки.

- У випадках частого нетримання або якщо шкіра була уражена раніше, можна наносити плівку кожні 12-24 години.

- При нанесенні на складки, вирівняйте ділянку шкіри, переконайтесь, що плівку нанесено на всю площу та дайте їй висохнути.

- Уникайте використання мазей та кремів, оскільки ефект від плівки Cavilon буде втрачено.

- При нанесенні в декілька шарів шкіра ставатиме жорсткою.



Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «ВОЛЕС»,
04210, Україна, м.Київ,
пр-т Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1
+38 (044) 581-11-38
sale@voles.com.ua
www.voles.com.ua