



Пробірка для забору капілярної крові з К3/К2 ЕДТА

Інструкція по використанню

Призначення

Пробірки з ЕДТА-К2 та ЕДТА-К3 використовуються для дослідження цільної крові у гематології. Пробірки з ЕДТА можуть використовуватися для рутинних імуногематологічних досліджень (тобто групування еритроцитів), визначення резус-приналежності та серологічного тестування, дослідження маркерів вірусів у скринінгових лабораторіях. Внутрішня сторона стінки пробірки вкрита ЕДТА-К2 або ЕДТА-К3. ЕДТА зв'язує іони кальцію, тим самим блокуючи систему згортання крові. Клінічний аналіз крові слід проводити упродовж 3 годин після забору крові.


Найменування	Наповнювач	Об'єм	Капіляр	Колір кришки	Пакування
Пробірка для забору капілярної крові з К2 ЕДТА	К2 ЕДТА	0,2 мл 0,25 мл 0,5 мл	3 капіляром	фіолетовий	Індивідуальна упаковка; упаковка 100 шт.
Пробірка для забору капілярної крові з К3 ЕДТА	К3 ЕДТА	0,2 мл 0,25 мл 0,5 мл	3 капіляром	фіолетовий	Індивідуальна упаковка; упаковка 100 шт.

Спосіб використання:

1. Виберіть необхідний об'єм пробірки в залежності від завдань дослідження.
2. Підготуйте допоміжні засоби для взяття крові (одноразовий стерильний ланцет, систему взяття капілярної крові, дезінфікуючий засіб, ватний тампон).
3. Обробіть місце уколу, дайте висохнути (залишки дезінфікуючого засобу можуть викликати гемоліз).
4. Проведіть пункцію за допомогою стерильного ланцета.
5. Першу краплю крові витріть.
6. Обережно масажуючи долоню, палець, або п'яту, зберіть краплі крові в капіляр.
7. Коли капіляр заповнений, систему забору поверніть вертикально, щоб кров витекла з капіляра.
8. Коли кров витекла в контейнер, вийміть капіляр з системи і утилізуйте.
9. Закрийте контейнер.
10. Обережно переверніть пробірку 8-10 разів, негайно, після забору крові, щоб отримати вірну суміш добавки та крові. Переверніть наповнену пробірку, а потім верніть її у вертикальне положення.
11. Не струшуйте!
12. На заповнений контейнер нанесіть маркування.

13. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

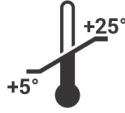

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



ВИРОБНИК: Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Ханчжоу Роллмед Ко., Лтд.

адреса: Room 913, Yuanmao Mansion No.5, Wen Er West Road, Xihu District, 310012 Hangzhou City, People's Republic Of China/

Рум 913, Юанмао Мансйон, No. 5, Вен Ер Вест Род, Ксіху Дістрікт, 310012 Ханчжоу Сіті, Китайська Народна Республіка

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Дата останнього перегляду
09 листопада 2020 року

Шульга О.Л.